


روش اتصال چست الکتروود های ECG

ECG Chest Electrodes Placement Guide

مطابق با استاندارد IEC

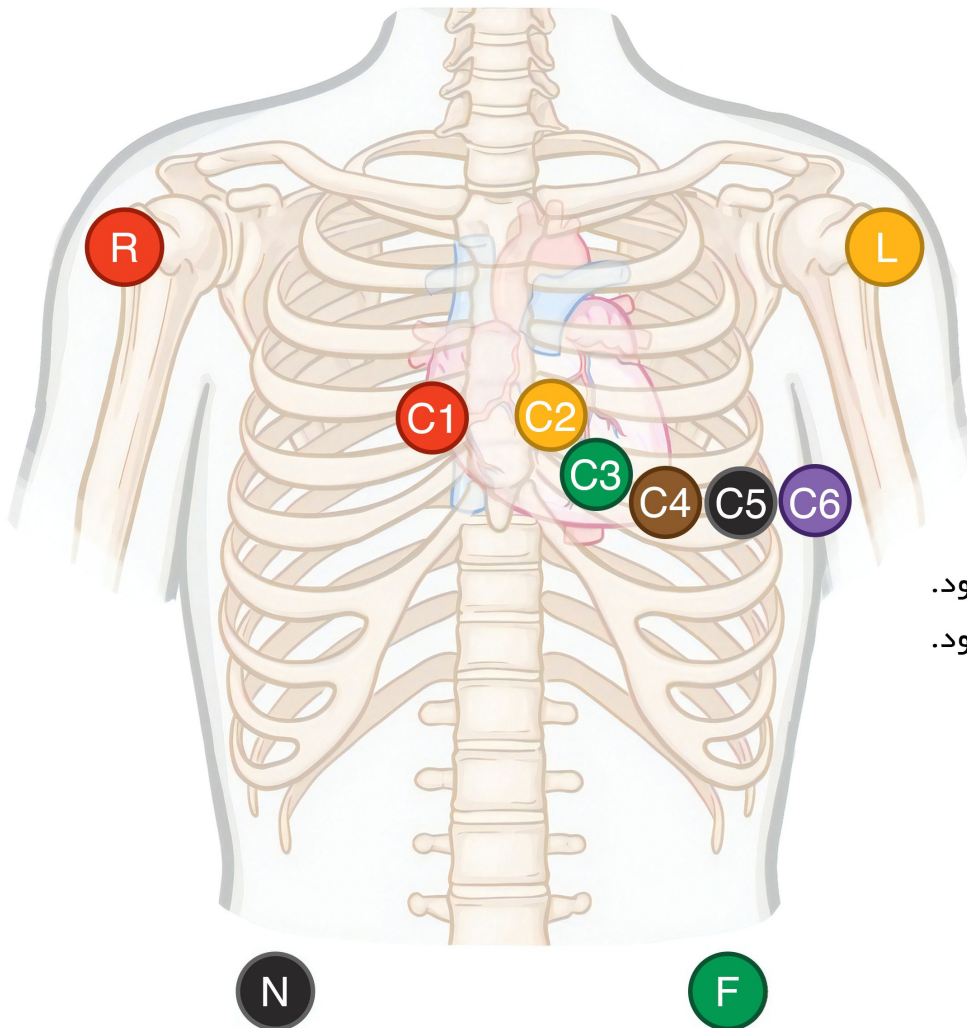

C1 فضای زیر دنده 4 ، در سمت راست جناغ سینه

C2 فضای زیر دنده 4 ، در سمت چپ جناغ سینه

C3 فضای بین C2 و C4

C4 فضای زیر دنده 5، زیر خط میانی ترقوه (زیر خط آگزیلاری یا همان محور جلویی)

C5 فضای زیر دنده 5، در امتداد C4 (زیر خط آگزیلاری یا همان محور جلویی)

C6 فضای زیر دنده 5، در امتداد C5 (زیر خط آگزیلاری یا همان محور جلویی)

R در سمت راست ، زیر ترقوه ها چسبانده شود.

L در سمت چپ ، زیر ترقوه ها چسبانده شود.

N قسمت انتهایی دنده ها یا در امتداد خط ناف و در راستای خط میانی ترقوه چسبانده شود.

F قسمت انتهایی دنده ها یا در امتداد خط ناف و در راستای خط میانی ترقوه چسبانده شود.

