

Your choice for Wound care management

پانسمانی ایده آل

مقرون به صرفه ✓

ایجاد بهترین شرایط التیام زخم ✓

موثر در درمان انواع زخم ✓




وارد کننده ی پانسمان های پیشرفته ی درمان زخم

(نماینده انحصاری در ایران)

RenoFoam

RenoFoam پانسمان فوم آب دوست است که برای محافظت از پوست در برابر آسیب های ناشی از ترشحات زیاد طراحی شده است. این محصول متشکل از فیلم نیمه تراوای پلی اورتان و فوم پلی اورتان است و به زخم نمی چسبد.

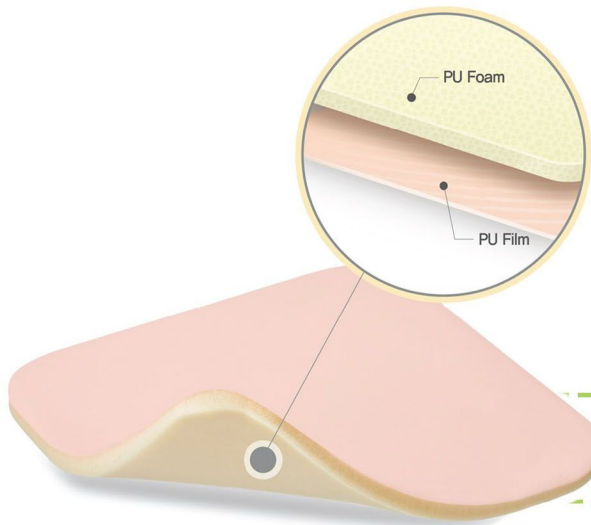

- ۱ از تشکیل لخته خون در اطراف محل زخم جلوگیری کرده و ایجاد اسکار را به حداقل می رساند.
- ۲ ترشحات زخم را جذب کرده و محیط مرطوب و مناسب درمان را در محل زخم حفظ می کند.
- ۳ لایه فیلم پلی اورتان باعث جلوگیری از نفوذ آب و باکتری های خارجی می شود.
- ۴ با توجه به چسبیده نبودن ، در هنگام برداشتن پانسمان بیمار درد کمتری احساس می کند.
- ۵ با قدرت جذب بالا و توانایی نگهداری ترشحات ، مانع از خیس خوردگی در مجاورت زخم می شود.




زخم های مزمن با ترشحات متوسط و زیاد ، مانند زخم های فشاری ، زخم پا ، زخم دیابتی ، زخم شریانی ، زخم وریدی زخم های حاد مانند سایش ، پارگی پوست ، زخم پیوند پوست و محل های اهدا کننده پوست زخم های بعد از عمل جراحی ، زخم های تروما ، و زخم های با ضخامت جزئی و سطحی.

موارد مصرف

Thickness(mm)	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
5	FO14EN01	10 X 10	10
	FO14EN02	15 X 15	10
	FO14EN03	20 X 20	10

RenoFoam Heel برای مناطق ناهموار مانند پاشنه ، آرنج ، اسکروتوم ها و دیگر مناطق آناتومیکی که پانسمان مسطح مناسب نیست ، طراحی شده است.

RenoFoam Heel

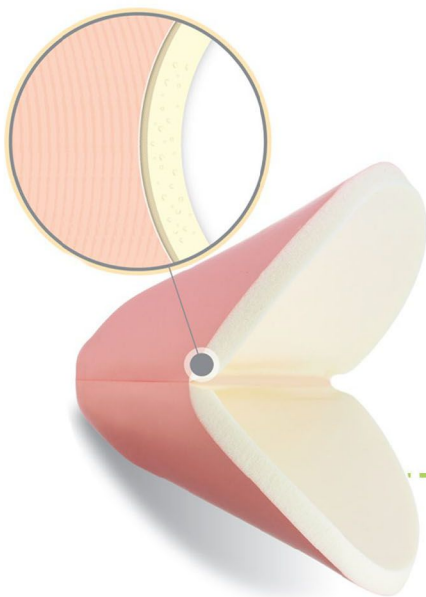

- ۱ این نوع پانسمان که دارای فومی به ضخامت 7 میلی متر می باشد نرم و کاهنده فشار است .
- ۲ با قالبی فوق العاده راحتی بسیار خوبی را فراهم می نماید.
- ۳ از تشکیل لخته خون در اطراف محل زخم جلوگیری کرده و ایجاد اسکار را به حداقل می رساند.
- ۴ فوم پلی اورتان فوق جاذب که رطوبت مطلوب را در محیط زخم برای بهبود بهتر فراهم می کند.





زخم های مزمن با ترشحات متوسط و زیاد ، مانند زخم های فشاری ، زخم پا ، زخم دیابتی ، زخم شریانی و زخم وریدی زخم های حاد مانند سایش ، پارگی پوست ، زخم پیوند پوست و محل های اهدا کننده پوست ، زخم های بعد از عمل جراحی ، زخم های تروما و زخم های با ضخامت جزئی و سطحی. همچنین در بیماران با ضایعات نخاعی و محدودیت حرکتی برای پیشگیری از ایجاد زخم ، کاملاً مناسب و موثر است.

موارد مصرف

Thickness(mm)	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
7	FO14EN33	13 X 10	5

RenoFoam A

RenoFoam A پانسمان فوم نرم فوق جاذب با یک لایه چسبنده داخلی است. این ترکیب از فوم پلی اورتان قابل انعطاف و جاذب تشکیل شده که با یک لایه چسبنده پوشیده شده است و لایه بیرونی ، فیلم پلی ارتان نیمه تراوا می باشد.

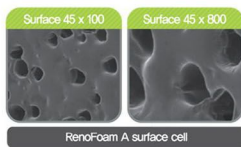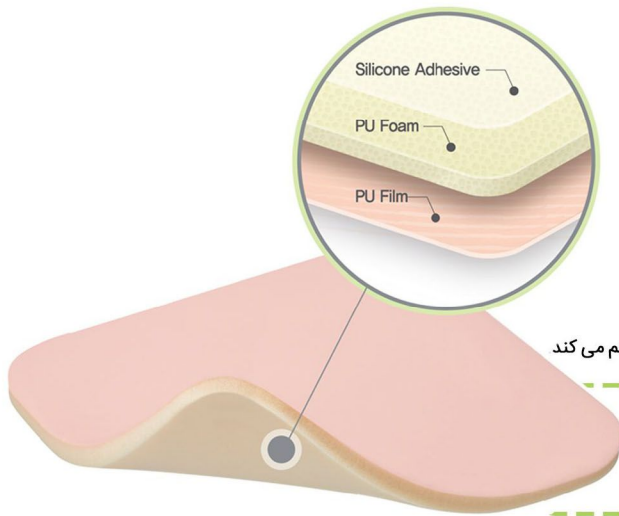

۱ با توجه به لایه چسبنده داخلی به آسانی چسبیده و به آسانی برداشته می شود .

۲ لایه چسبنده داخلی ایجاد حساسیت نمی کند و ترشحات و سلول های باقی مانده در محل زخم را به حداقل می رساند و از چسبندگی به زخم جلوگیری می کند .

۳ سرعت و حجم جذب ترشحات آن بسیار عالی است.

۴ از تشکیل لخته خون در اطراف محل زخم جلوگیری کرده و ایجاد اسکار را به حداقل می رساند.

۵ این پانسمان فوم پلی اورتان فوق جاذب تشکیل شده است که رطوبت مطلوب را در محیط زخم برای بهبود بهتر فراهم می کند

زخم های مزمن با ترشحات متوسط و زیاد ، مانند زخم های فشاری ، زخم پا ، زخم دیابتی ، زخم شریانی زخم وریدی ، زخم های حاد مانند سایش ، پارگی پوست ، زخم پیوند پوست و محل های اهدا کننده پوست ، زخم های بعد از عمل جراحی ، زخم های تروما ، و زخم های با ضخامت جزئی و سطحی.

موارد مصرف

Thickness(mm)	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
5	FS14EN01	10 × 10	10
	FS14EN02	15 × 15	10
	FS14EN03	20 × 20	10

Renogel N

Renogel N یک شیت هیدروژل شفاف و مرطوب می باشد. هیدروژل رطوبت مناسب پوست و زخم را تأمین و همچنین ترشحات زخم را جذب و تعادل رطوبت را در زخم حفظ می نماید.



۱ هیدروژل باعث جذب ترشحات زخم و محافظت از آن می شود.

۲ برای تسکین درد محیط زخم را مرطوب نگه می دارد.

۳ اثر خنک کننده و آرامش بخشی را فراهم می کند.


۴ باعث رطوبت رسانی به بافت نکروز شده و به سرعت آن را از بین می برد.

۵ شفافیت این پانسمان امکان بررسی وضعیت زخم را فراهم می آورد.

برای کنترل درد محل زخم ، کمک به دبریدمان اتولیتیک با رطوبت رسانی بافت نکروز و اسلاف ، جذب ترشحات مناسب بر روی زخم های دردناک و اختلالات پوستی مانند زخم پا ، آسیب پرتودرمانی و سوختگی. پانسمان شیت هیدروژل می تواند برای نوزادان استفاده شود و حساسیت ایجاد نمی کند.


موارد مصرف

Ref. No.	Size (cm)	QTY / Box
HG14EN01	5 × 5	5
HG14EN04	10 × 10	5
HG14EN05	15 × 15	5

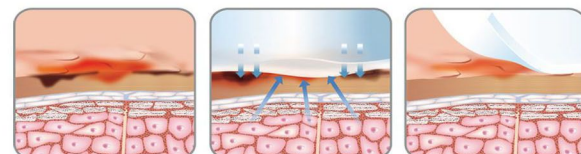

RenoCare Hydrocolloid

از زخم محافظت کرده و برای درمان زخم محیط مرطوب را فراهم می‌سازد. RenoCare Hydrocolloid پانسمان هیدروکلوئیدی است که ترشحات زخم را جذب می‌کند ،

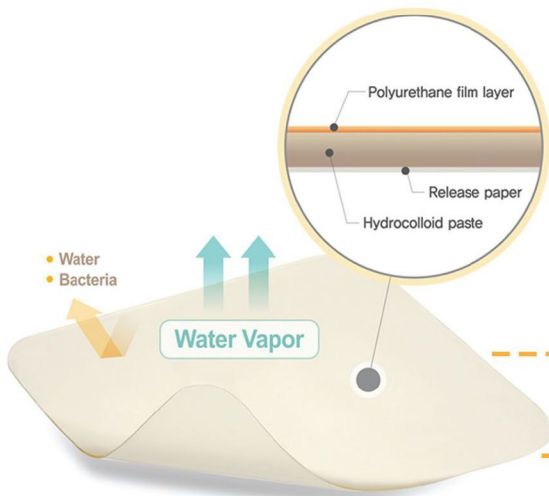

- ۱ ترشحات زخم را جذب کرده و محیط مرطوب مناسب را در محل زخم حفظ می‌کند.
- ۲ پانسمان خود چسبنده‌ای که به راحتی قابل استفاده است.
- ۳ بسیار انعطاف پذیر و قابل استفاده در نواحی برجسته ، مفاصل و قسمت های غیر مسطح بدن می باشد.
- ۴ از تشکیل لخته خون در اطراف محل زخم جلوگیری کرده و ایجاد اسکار را به حداقل می‌رساند.
- ۵ امکان استحمام در طول مدت استفاده از پانسمان فراهم می‌باشد .
- ۶ لایه ی فیلم پلی اورتان باعث جلوگیری از نفوذ آب و باکتری های خارجی می‌شود.




برای زخم های با ترشح کم تا متوسط مانند زخم های فشاری و زخم های پا ، موارد مصرف دیگر شامل زخم های با ضخامت جزئی و کامل ، محل های اهدا کننده پیوند ، ساییدگی ، زخم تروما ، زخم دیابتی ، زخم های بعد از عمل جراحی و سوختگی های سطحی (درجه یک و دو)

موارد مصرف

Type	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box	Type	Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
Standard	HD14EN05	10 X 10	10	Thin	HD14EN01	10 X 10	10
	HD14EN09	15 X 15	10		HD14EN11	20 X 20	10
	HD14EN13	20 X 20	10				

RenoCare B

در محل زخم وجود دارد. پانسمان هیدروکلوئیدی است که در قسمت خارجی آن لایه‌ای از فوم جهت کاهش فشار

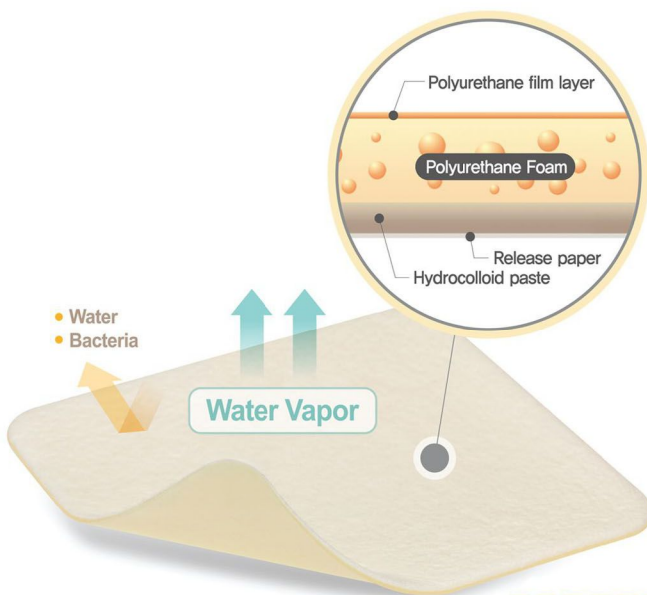

- ۱ نرم و کاهنده ی فشار می‌باشد.
- ۲ ترشحات را جذب کرده و تعادل رطوبت را در محل زخم حفظ می‌کند.
- ۳ در هنگام تعویض با ملایمت برداشته می‌شود.
- ۴ پانسمان خود چسبنده‌ای که به راحتی قابل استفاده است.
- ۵ بعد از برداشتن هیچ باقیمانده‌ای روی پوست به جا نمی‌ماند.
- ۶ بسیار انعطاف پذیر و قابل استفاده در نواحی برجسته ، مفاصل و قسمت های غیر مسطح بدن می‌باشد.




برای زخم های با ترشح کم تا متوسط مانند زخم های فشاری و زخم های پا ، موارد مصرف دیگر شامل زخم های با ضخامت جزئی و کامل ، محل های اهدا کننده پیوند ، ساییدگی ، زخم تروما ، زخم دیابتی ، زخم های بعد از عمل جراحی و سوختگی های سطحی (درجه یک و دو)

موارد مصرف

Ref. No.	Size(cm)	QTY / Box
HD21EN03	10 X 10	10
HD21EN09	20 X 20	10

RenoCare Alginate

RenoCare Alginate (کلسیم آلژینات) پانسمان جاذب ساخته شده از جلبک دریایی است. خیلی سریع ترشحات زخم را جذب می کند و تغییر حالت داده و به شکل ژل درآمده و باعث حفظ تعادل در رطوبت محیط زخم شده و شرایط را برای بهبود زخم فراهم می کند.

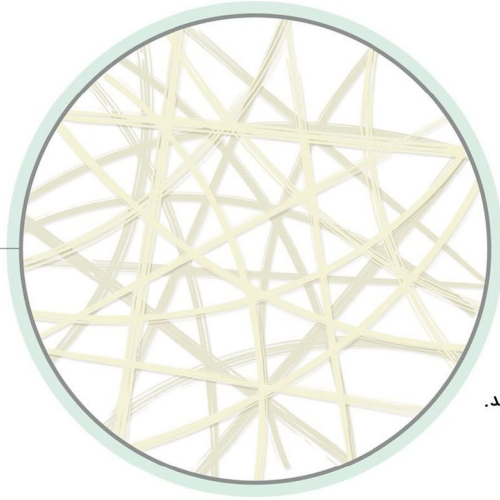

۱ بسیار سریع ترشحات را جذب می کند ، به ژل تغییر حالت می دهد و محیط مرطوب برای بهبود زخم را فراهم می کند.

۲ قابل استفاده در زخم با ترشحات متوسط تا زیاد با قابلیت جذب فوق العاده.


۳ برای هر نوع زخم قابل استفاده است.

۴ به زخم نمی چسبد و هنگام برداشتن احساس درد در محل زخم به حداقل می رسد.



زخم های مزمن با ترشحات متوسط و زیاد ، مانند زخم های فشاری ، زخم پا ، زخم دیابتی ، زخم شریانی و زخم وریدی. زخم های حاد مانند سایش ، پارگی پوست ، زخم پیوند پوست و محل های اهدا کننده پوست ، زخم های بعد از عمل جراحی و زخم های تروما ، و زخم های با ضخامت جزئی و سطحی.


موارد مصرف

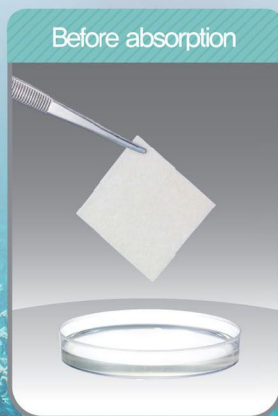

Before absorption



Gelation after absorption

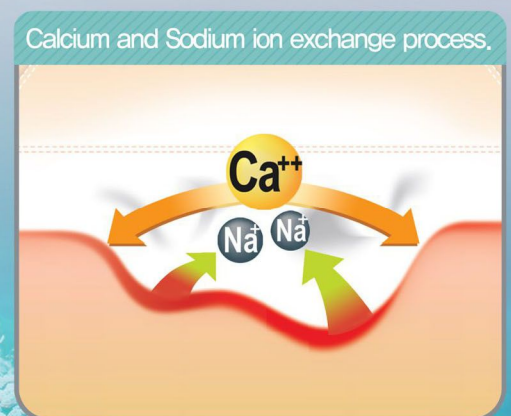

Calcium and Sodium ion exchange process.

Ref. No.	Size (cm)	QTY / Box
AL14EN03	10×10	10
AL14EN04	10×20	10

Absorptive Calcium Alginate
Natural Dressing for Bleeding Wound


تعداد در بسته	اندازه محصولات (سانتی متر)	کد سفارش	شرح محصولات/Type	گروه محصولات	
10	10 * 10	FO14EN01	RenoFoam	رنو فوم	
10	15 * 15	FO14EN02			
10	20 * 20	FO14EN03			
5	13 * 10	FO14EN33	RenoFoam Heel		
10	10 * 10	FS14EN01	RenoFoam A		
10	15 * 15	FS14EN02			
10	20 * 20	FS14EN03			
10	10 * 10	AL14EN03	RenoCare Alginate	آلژینات	
10	10 * 20	AL14EN04			
10	10 * 10	HD14EN05	RenoCare Hydrocolloid Standard	هیدروکلوئید	
10	15 * 15	HD14EN09			
10	20 * 20	HD14EN13			
10	10 * 10	HD14EN01	RenoCare Hydrocolloid Thin		
10	20 * 20	HD14EN11			
10	10 * 10	HD21EN03	RenoCare B		
10	20 * 20	HD21EN09			
5	5 * 5	HG14EN01	Renogel N		هیدروژل
5	10 * 10	HG14EN04			
5	15 * 15	HG14EN05			

The Solution for Wound Management

Care for tomorrow



Product Selection Guide

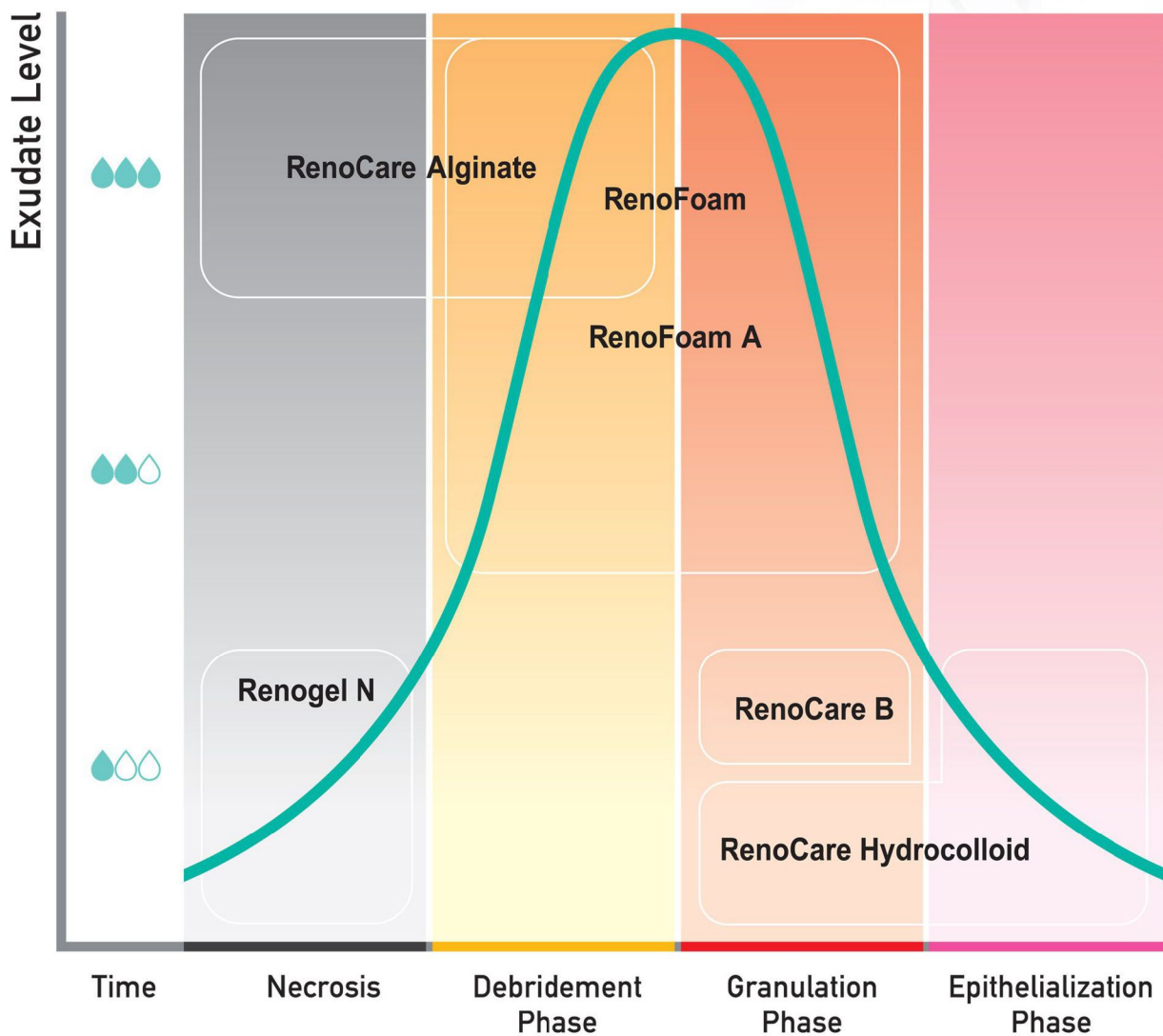



داده گستران دنا
D.G. Dena

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT US AT



dgdena_woundcare



dgdena_woundcare



www.dgdena.com

شرکت داده گستران دنا وارد کننده پانسمان های پیشرفته درمان زخم و همچنین نماینده انحصاری کمپانی T&L کره جنوبی در ایران می باشد.

کمپانی T&L با بهره گیری از پیشرفته ترین و بروزترین تکنولوژیها و تلفیق آن با نوآوری و خلاقیت توانسته است محصولاتی بسیار با کیفیت و هم تراز با برندهای مطرح دنیا را به بازار جهانی عرضه نماید. محصولات این شرکت همگی دارای تأییدیه های معتبر FDA و CE می باشند.



کارخانه:

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز
بلوار نوآوران، خیابان ۱، پلاک ۳۰
کدپستی: ۷۱۵۸۱۷۷۳۶
تلفن: ۰۷۱۳۷۳۲۵۴۶ - ۳۷۷۳۲۵۴۴
فاکس: ۰۷۱۳۷۴۳۱۰۸

دفتر تهران:

خیابان سهروردی شمالی کوچه شهید
سلطانی، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۱۴
کدپستی: ۱۵۵۵۹۱۵۳۷
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۲۰۸۱۹ - ۸۸۵۰۴۰۰۹
فاکس: ۰۲۱۸۵۲۰۹۶۷

دفتر مرکزی:

شیراز، فرهنگ شهر، بعد از کوچه ۲۸
ساختمان دنا، طبقه دوم، واحد ۳
کدپستی: ۷۱۸۷۹۱۷۷۳۳
تلفن: ۰۷۱۹۱۰۰۲۹۳۰
فاکس: ۰۷۱۳۶۳۰۲۷۷۱

www.dgdena.com

info@dgdena.com