


DG Derm

Super Absorbent Core

پانسمان فوم سیلیکون چسبدار


Silicone Foam Dressing with SAF

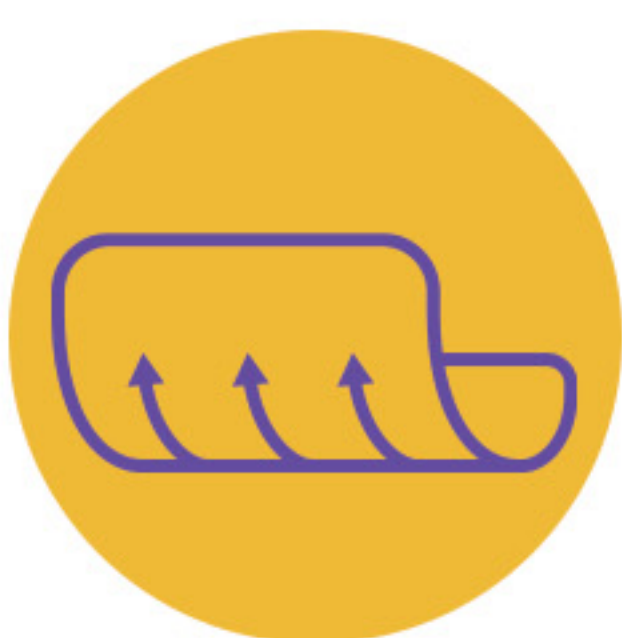

کاهش درد حین تعویض پانسمان



جذب بالای ترشحات

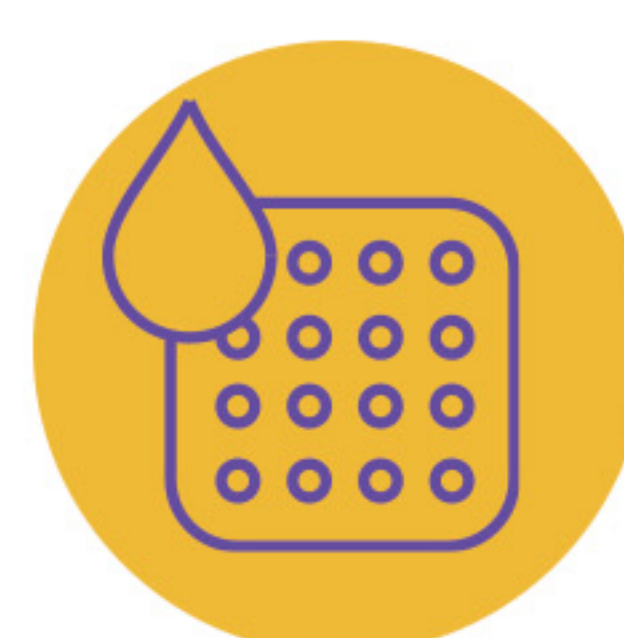

مناسب پوست های حساس




ضد آب با قابلیت استحمام

پانسمان فوم سیلیکون چسبدار دی جی درم ، پانسمانی مدرن و چند منظوره است که برای زخم‌هایی با ترشح متوسط تا زیاد و غیر عفونی مناسب است. این پانسمان دارای لایه‌ای از جنس سیلیکون بوده که به زخم و پوست اطراف آن آسیب نمی‌رساند. استفاده از این نوع پانسمان بعلت جذب و ماندگاری بالا، سبب صرفه جویی در زمان، راحتی بیمار، تسریع در درمان زخم و کاهش هزینه‌ها می‌گردد.

موارد استفاده

پانسمان فوم سیلیکون چسبدار دی جی درم در ابعاد و مدل‌های مختلف طراحی شده است و میتوان آن را برای درمان طیف وسیعی از زخم‌های حاد و مزمن، زخم‌های دارای ترشح، زخم‌های دیابتی، زخم‌های وریدی، زخم‌های فشاری، بریدگی‌های پوستی و انواع زخم‌های تروماتیک استفاده کرد. همچنین از این پانسمان میتوان با هدف پیشگیری از آسیب‌های پوستی مانند کاهش ریسک بروز زخم بستر استفاده نمود.

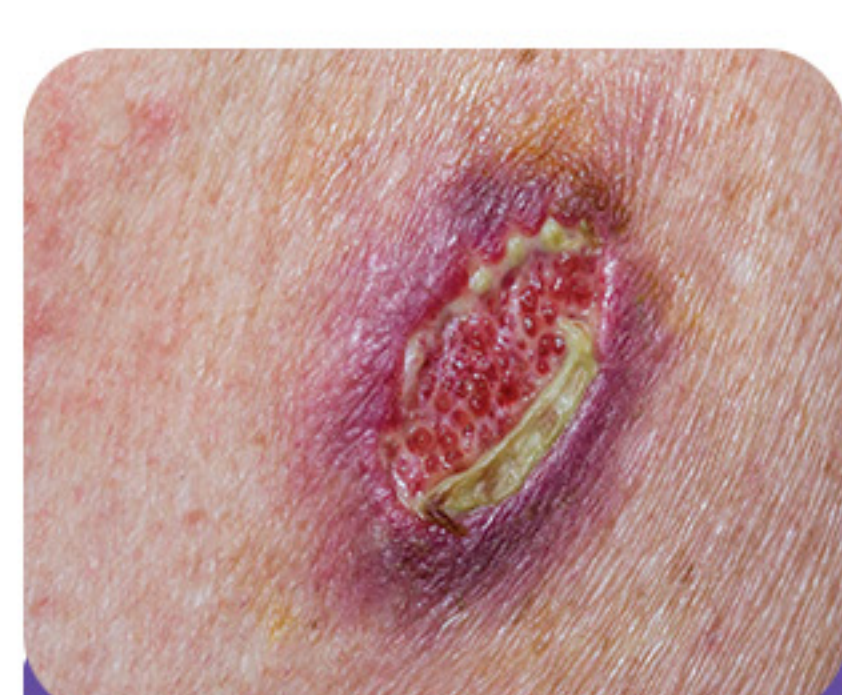

Wound dehiscence

Surgical
wounds



Transplant sites

Traumatic
wounds



Diabetic foot

Chronic
wounds



Surgical staples



Minimally invasive



Skin abrasions



Skin tears



Pressure ulcers



Leg ulcers

پانسمان فوم سیلیکونی ساکروم

این پانسمان به طور خاص متناسب با ناحیه خاجی طراحی شده و مناسب زخم‌های فشاری، جراحی و... در ناحیه ساکرال میباشد. این پانسمان، لبه‌های زخم را بسته و از نشت اگزودا به پوست اطراف جلوگیری و در نتیجه خطر خیساندن را به حداقل می‌رساند.

پانسمان فوم سیلیکونی پاشنه

این پانسمان محصولی ویژه برای درمان زخم‌های پاشنه پا یا آرنج می‌باشد. امکان استفاده برای مدت زمان طولانی، چسبندگی فوق العاده، عدم نیاز به نگهدارنده ثانویه، عدم ایجاد تروما و درد به هنگام جداسازی آن از روی پوست از ویژگی‌های این پانسمان میباشد.




ویژگی های محصول

- ✓ استریل
- ✓ ضد آب با قابلیت استحمام
- ✓ قابلیت جذب بالای ترشحات
- ✓ انعطاف پذیری بالا
- ✓ راحتی استفاده برای بیماران و درمانگران زخم
- ✓ جذب مناسب ترشحات
- ✓ کاهش درد و تروما ناشی از تعویض پانسمان
- ✓ قابلیت بررسی زخم بدون نیاز به تعویض (وجود لایه سیلیکون سبب جدا شدن پانسمان از پوست بیمار شده و در نتیجه امکان برداشتن قسمتی از پانسمان و مشاهده زخم بدون نیاز به تعویض را فراهم میکند.)
- ✓ وجود لایه نیمه تراوا در سطح خارجی اجازه تبخیر و تبادلات گازی را فراهم کرده لذا با جذب و تبخیر اگزودای اضافی و حفظ رطوبت مناسب، ترمیم بافت و سیر مراحل درمان زخم سریعتر انجام میگیرد.

جذب مناسب ترشحات

پانسمان فوم سیلیکون چسبدار دی جی درم با دارا بودن پد جذب ۳ لایه ، ترشحات را بخوبی جذب و نگهداری نموده و از ورود مجدد ترشحات به زخم، حتی در اثر فشار، جلوگیری می کند. این پد قابلیت کنترل حجم بالای ترشحات معمولی و حتی چسبناک را داشته و سبب جلوگیری از خیس خوردگی پوست اطراف زخم می شود.

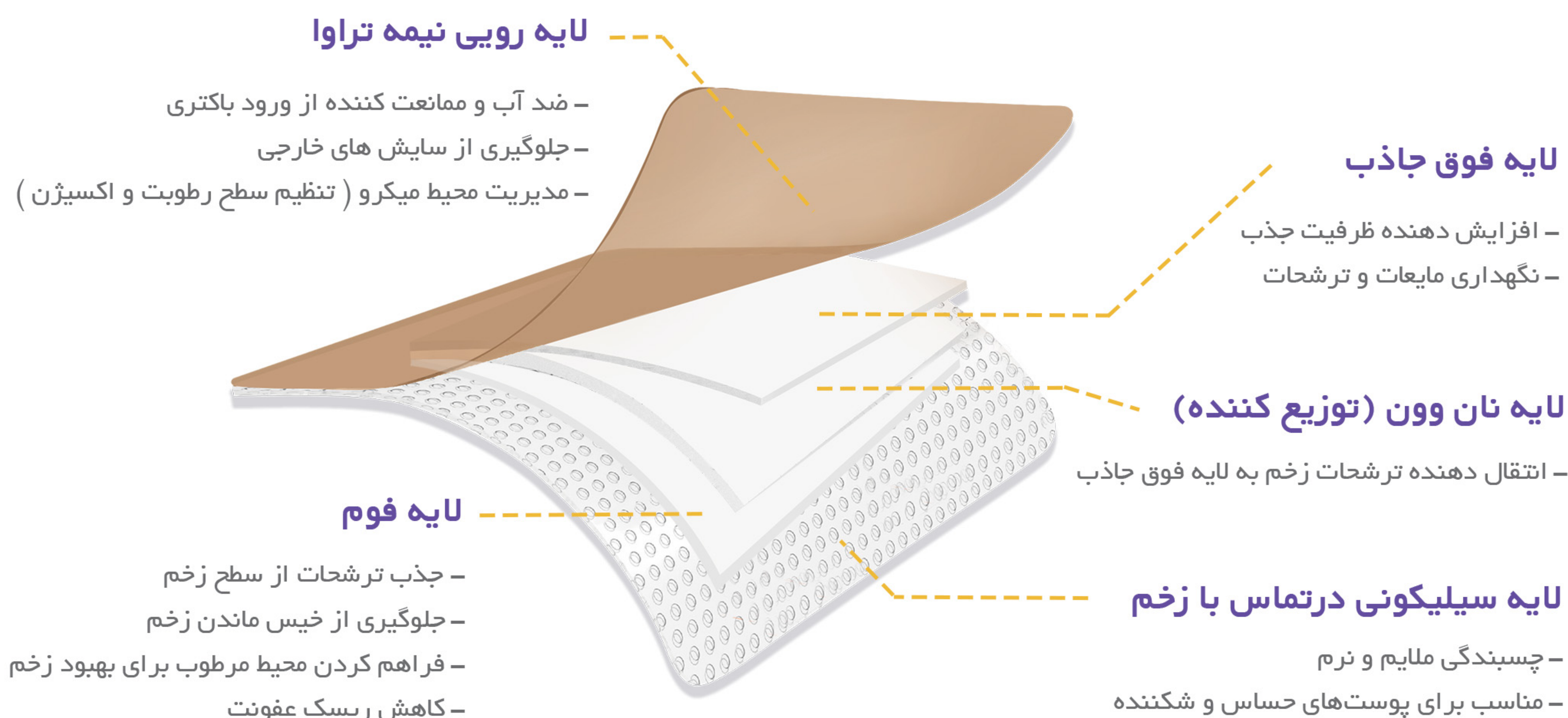


Wound Types



- Sloughy
- Necrotic
- Granulating
- Fungating Cavity

Heavy Exudate



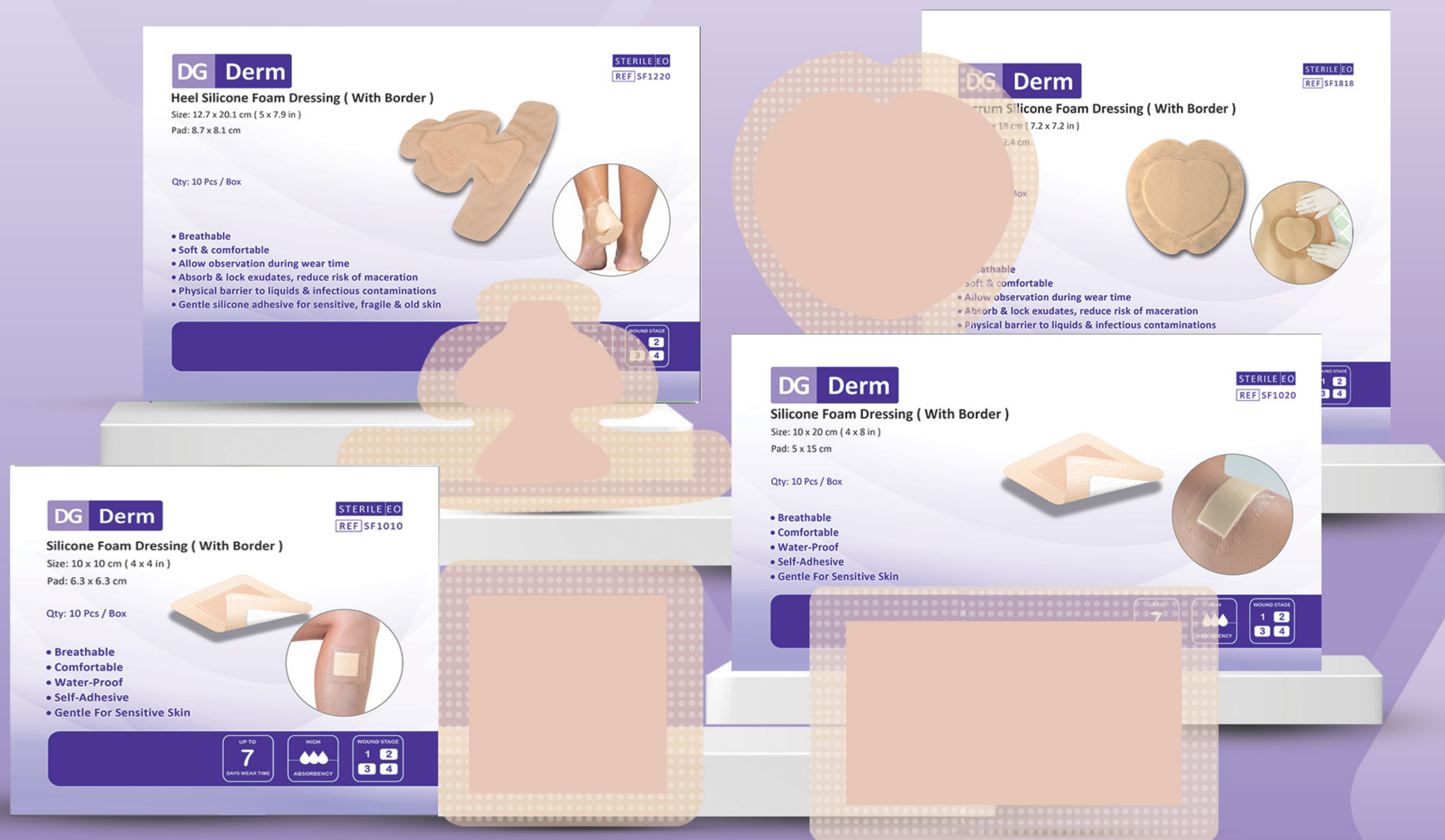

Type	REF	Size (cm)	Pad size (cm)	QTY/ Box	Shape
Silicone Foam Dressing (with border)	SF1010	10 X 10	6.3 X 6.3	10	
Silicone Foam Dressing (with border)	SF1515	15 X 15	11 X 11	10	
Silicone Foam Dressing (with border)	SF1020	10 X 20	5 X 15	10	
Heel Silicone Foam Dressing (with border)	SF1220	12.7 X 20.1	8.7 X 8.1	10	
Sacrum Silicone Foam Dressing (with border)	SF1818	18 X 18	14 X 12.4	10	

دفتر مرکزی : شیراز، بلوار فرهنگ شهر، بعد از کوچه ۲۸ | دفتر تهران : سهروردی شمالی ، کوچه شهید سلطانی | کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، بلوار نوآوران
 ساختمان دنا فکس: ۰۲۷۷۱۰۳۶۳۰ | تلفن: ۰۹۱۰۰۲۹۳۰-۰۷۱ | طبقه ۴ ، واحد ۱۴ | تلفن: ۰۸۱۹۰۸۸۵۲-۰۲۱ | خیابان ۵۰۱ ، پلاک ۳۰-۲۸ | تلفن: ۰۳۷۷۳۲۵۴۶-۰۷۱